



PACKAGING

IMPRIMERIE DE PONTIERRY
23, rue des Activités
91540 Ormoy - Mennecy
Tél : +(33) 01 64 57 34 33
www.ippackaging.fr

BON A TIRER du 31/03/2021

CLIENT : **STIPLASTICS**

PRODUIT : **NOTICE-MBB-PHYSIOMER-CNOT1390**

REFERENCE : **05NO087-000110**

FORMAT À PLAT : **L.159 x H.208 mm**

FORMAT PLIÉ : **80x35 mm**

COULEUR : **(1) Bleu 294 - R°V°**

SUPPORT : **Offset**

GRAMMAGE : **50 gr**

SIGNATURE CLIENT

Bon à tirer pour textes, graphismes et références couleur, mais en aucun cas pour le rendu couleur.

PHYSIOMER®

Toute la richesse de l'eau de mer pour mieux respirer

CNOT1390

05N0087 000110

Les nouveaux-nés et nourrissons respirent instinctivement par leur nez, il est donc important que leurs voies respiratoires soient dégagées. Le **Mouche Bébé PHYSIOMER® Baby** soulage de manière douce le nez congestionné de bébé pour l'aider à mieux respirer en cas de rhume et rhinopharyngite. Son embout souple est adapté au nez de bébé et permet de retirer l'excès de mucus tout en douceur.

Le **Mouche Bébé PHYSIOMER® Baby** pour bébés et jeunes enfants*

Contenu : 1 Mouche Bébé + 5 Filtres protecteurs à usage unique

Comment utiliser le Mouche Bébé PHYSIOMER® Baby ?



Avant la première utilisation, rincez le dispositif à l'eau chaude et séchez-le soigneusement. Procéder à l'aspiration nasale avant les repas, lorsque l'enfant est éveillé et calme.

- 1- Lavez-vous les mains.
- 2- Insérer un filtre à usage unique dans la coque arrière et refermer le dispositif avec la coque avant.
- 3- Assurez-vous que tous les composants soient correctement assemblés.
- 4- Allonger votre bébé sur le dos.
- 5- Placer l'embout souple à l'entrée de la narine de bébé et aspirer doucement les sécrétions par l'embout buccal. Le filtre protecteur bloque le mucus.
- 6- Renouveler dans l'autre narine.
- 7- Relever doucement bébé et lui essuyer le nez avec un mouchoir.
- 8- Jeter le filtre après chaque utilisation.



Après chaque utilisation, rincer le **Mouche Bébé PHYSIOMER® Baby** à l'eau chaude et bien le sécher. Pour des raisons d'hygiène et pour garantir de bonnes performances, insérez un nouveau filtre à usage unique avant chaque utilisation.

Utiliser aussi souvent que nécessaire en cas de sécrétions nasales.

Pour une meilleure élimination des sécrétions nasales, utiliser **PHYSIOMER® Unidoses** ou le spray **PHYSIOMER® Baby** avant l'aspiration nasale.

Recharge de 20 filtres vendue séparément.

Se reporter à la notice de chacun des produits pour un usage optimal et sûr.


* Il est recommandé de demander l'avis d'un médecin/professionnel de la santé avant d'utiliser le **Mouche Bébé PHYSIOMER® Baby** pour les nouveau-nés ou en cas de malformations nasales à la naissance, de chirurgie nasale récente ou de blessure nasale. Si les symptômes persistent au-delà de 5 jours, consulter votre professionnel de santé.

Ne pas stériliser, ne pas bouillir.

Ne pas utiliser après la date d'expiration.

Ne pas utiliser le dispositif si son apparence a été altérée ou sans filtre à usage unique.

Conserver dans son emballage d'origine.

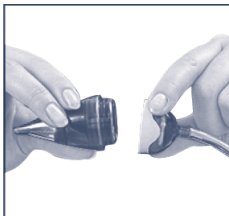

AVERTISSEMENT : RISQUE D'ETOUFFEMENT – Petites pièces -

Tenir hors de portée et de la vue des bébés et des enfants.

Les incidents graves doivent être signalés au Laboratoire de la Mer et à l'autorité locale compétente.

www.physiomer.com

LABORATOIRE DE LA MER
ZAC de la Madeleine
Avenue du Général Patton
35400 Saint-Malo – FRANCE



Ne pas utiliser un produit cassé ou endommagé



Jeter le produit à la poubelle



Papier recyclable

Dispositif médical - Date de révision : 2020/10

PHYSIOMER®

All the goodness of the sea to breathe better

Newborns and infants instinctively breathe through their nose, so it is important that their airways are clear. **PHYSIOMER® Baby Nasal Aspirator** gently relieves a baby's congested nose to help them breathe better in case of colds and rhinopharyngitis.

Its soft tip is adapted to the baby's nose and allows the excess mucus to be gently removed.

PHYSIOMER® Baby Nasal Aspirator for infants and young children*

Content: 1 Nasal Aspirator + 5 protective single-use filters

How to use PHYSIOMER® Baby Nasal Aspirator?



Before the first use rinse the device under hot water and dry it thoroughly. Proceed with nasal aspiration before feeding, when the child is awake and calm.

- 1- Wash your hands.
- 2- Insert a single-use filter in the back shell and close the device with the front shell.
- 3- Ensure that all components are properly assembled.
- 4- Lay your baby down on his/her back.
- 5- Place the soft tip of the nasal aspirator at the entrance of the baby's nostril and gently inhale through the mouthpiece. Mucus is stopped by the protective filter.
- 6- Repeat in the other nostril.
- 7- Gently lift the baby and wipe his/her nose with a tissue.
- 8- Throw away the used filter after each use.



After each use, rinse the **PHYSIOMER® Baby Nasal Aspirator** with hot water and dry it thoroughly. For hygiene reasons and to ensure proper performance, insert a new single-use filter before each use.

Use as often as necessary in case of nasal secretions.

For better removal of nasal secretions, use **PHYSIOMER® Unidoses** or **PHYSIOMER® Baby** spray prior nasal aspiration.

Refill pack of 20 protective filters sold separately.

Please refer to the leaflet of each product for optimal and safe usage.

* It is recommended to ask for medical advice/healthcare professional advice before using **PHYSIOMER® Baby Nasal Aspirator** for newborns or in case of birth nasal defects, recent nasal surgery or nasal injury.


If symptoms persist for longer than 5 days, consult a healthcare professional.

Do not sterilise, do not boil.

Do not use after the expiry date.

Do not use the device if its original appearance has been altered or without a single-use filter.

Keep in its original packaging.

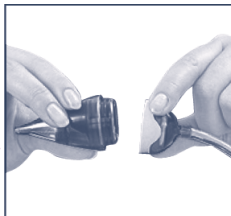

WARNING - CHOKING HAZARD – Small parts -

Keep out of reach and sight of babies and children.

Serious incidents must be reported to Laboratoire de la Mer and the local competent authority.

www.physiomer.com



LABORATOIRE DE LA MER
ZAC de la Madeleine
Avenue du Général Patton
35400 Saint-Malo – FRANCE



Do not use a broken or damaged product



Discard the product in the bin



Recyclable paper

Medical device - Revision date: 2020/10